
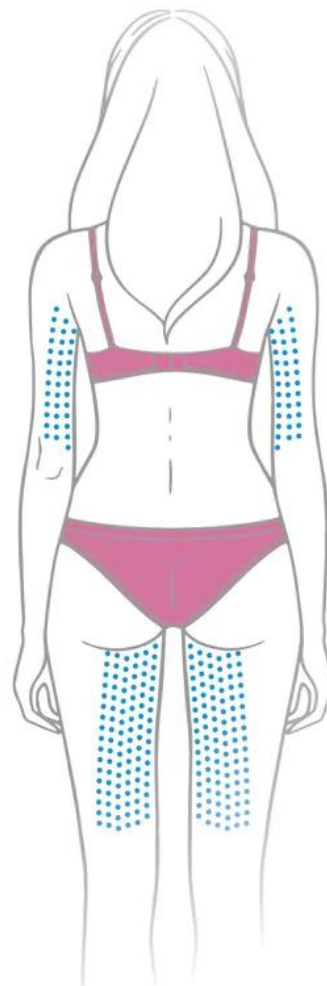


ПРОТОКОЛ

ОТ BEAUTYGEL

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА

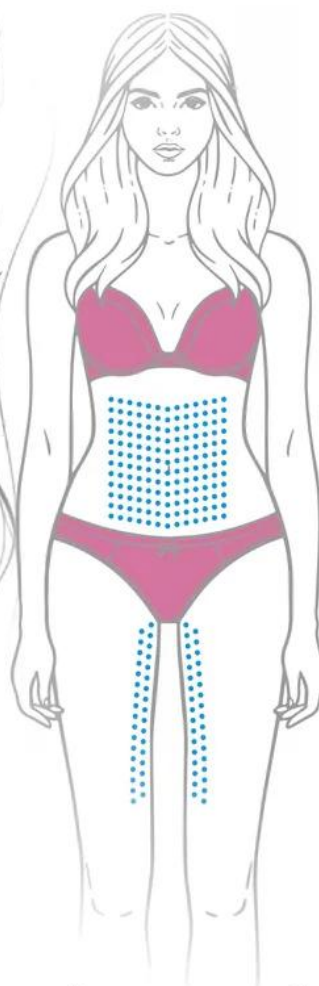

**100% ГОВЯЖИЙ НАТИВНЫЙ КОЛЛАГЕН 1 ТИПА
УВЕЛИЧЕНИЕ ТОНУСА И ТУРГОРА
КОЖИ, КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ**

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД (ПРИ СТАНДАРТНОМ РАЗВЕДЕНИИ): 1,5 МЛ=ПЛОЩАДЬ ЛАДОНИ.
ОБЪЕМ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕН X2 ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

**РУ № Г004-00110-00/
04799515 от 13.04.2026**

**ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА BEAUTY GEL
ПО 150 МГ В СТЕКЛЯННОМ ФЛАКОНЕ СТЕРИЛЬНЫЙ ПО
ТУ 21.10.60-005-50161889-2025.**

РУ № Г004-00110-00/04799515 от 13.04.2026

КОНЦЕНТРАЦИЯ КОЛЛАГЕНА: 3% (объем гидратируемого вещества 5 мл).

СОСТАВ: 100% Говяжий нативный коллаген I типа, обладающий большим количеством функциональных групп, абсорбирующих молекулы воды, за счет чего обеспечивается усиленная гидратация.

Производится по технологии многоступенчатой криогенной диспергации, что обеспечивает высокую точность измельчения, последующая ступенчатая калибровка через нано-сита формирует субстанцию с идентичными размерами частиц.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ♦ возрастные и эстетические инволюционные изменения кожи лица, тела, рук, ног различной этиологии;
- ♦ истончение, дряблость, снижение эластичности кожи;
- ♦ гипотрофические и атрофические рубцовые деформации, в т.ч. стрии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- ♦ индивидуальная чувствительность к компонентам имплантата;
- ♦ склонность к развитию гипертрофического и келоидного рубцевания;
- ♦ тяжелые хронические заболевания в стадии обострения;
- ♦ воспалительные заболевания кожи или инфекционный процесс (акне, герпес и т.д.);
- ♦ при несвертываемости крови и применении препаратов, увеличивающих продолжительность свертываемости крови;
- ♦ аутоиммунные заболевания и прохождение курса лечения иммуномодуляторами;
- ♦ положительная реакция при проведении аллергологического кожного теста;
- ♦ использование в участках, содержащих инородные тела или недеградируемые имплантаты (например, силикон);
- ♦ инъекции в кровеносные сосуды;
- ♦ беременность, период лактации;
- ♦ возраст до 18 лет.

Идеально сочетается с микроигльчатый RF лифтингом (возможное применение препарата сразу после процедуры или через 14 дней, для улучшения коллагена стимуляции, на усмотрение врача косметолога).

ОБЪЕМ ГИДРАТАНТА	КОНЦЕНТРАЦИЯ КОЛЛАГЕНА
5 мл	3%
3 мл	5%
2,5 мл	6%
2 мл	7,5%
1,5 мл	10%

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ:

Подготовка препарата: непосредственно перед началом процедуры необходимо гидратировать препарат 5 мл физического раствора интенсивно встряхивать флакон в течение 15 минут до достижения гомогенного инъекционного материала. Антисептическая обработка: очищение кожи. Нанесение аппликационной анестезии. Удаление остатков с зоны коррекции. Техника введения: внутрикожно методом «плотной укладки». Методика: выполняются поверхностные микропапулы. Между соседними папулами и рядами выдерживается расстояние не более 0,5 см. При проработке морщин и кожных складок папулы располагаются вплотную друг к другу, без пропусков. Допускается использование линейно-ретроградной техники. Инструменты: для лица, шеи и зоны декольте — 32G × 4 мм. Завершающий этап: финальная антисептическая обработка кожи постпроцедурным спреем, раствором хлоргексидина биглюконата 0,05% посредством распыления или с помощью пропитанной тканевой маски.

ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ:

Профилактика фото- и хроностарения; значительное увеличение тонуса и тургора кожи; коррекция рубцовых деформаций кожи; увлажнение и сияние кожи; уменьшение купероза.

КУРС: 3-5 процедур с интервалом 2-3 недели. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3-4 месяца.